

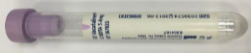

訊聯生物科技檢測服務檢體收件時間及保存注意事項公告

說明：

1. 收件服務時間：

- 15:00前通知訊聯調度中心，當天即安排至貴院收取檢體，如有特殊狀況無法當天收檢，將依檢體保存時效調整，以電話通知貴院，並於隔天優先安排收檢。
- 15:00後通知，檢體將於隔天收取。
- 訊聯收檢專線：0800-666 118

2. 各項檢體保存條件及時效

項目	檢體內容物	保存方式	檢體保存時效
脊髓性肌肉萎縮症(SMA)帶因篩檢 X染色體脆折症(FXS)帶因篩檢 	紫頭管(EDTA) 全血3 c.c.	冷藏(2~8°C)	採血後14天內進行檢測
第一孕期/第二孕期唐氏症血清篩檢 第一孕期子癲前症風險評估 	血清生化管, 康氏管 血清至少1 c.c	冷凍(0°C以下)	48小時內完成血清分離
非侵入性胎兒染色體檢測NIPT 	Cell-Free 採血管 全血10 c.c. (愛妻/暖爸方案須採兩管血)	常溫(6~37°C)	採血後4天內進行檢測

3. 由於台灣氣候炎熱，夏天車內溫度可飆升至40°C以上。為維護檢體之最佳品質，**非侵入性胎兒染色體檢測NIPT檢體**，抽檢完後可放置室溫保存，但運送煩請以冷藏方式配送，並以適當的硬殼包材包裝檢體，以避免檢體破裂，需重新抽血造成院所之困擾。(如下圖說明)

「NIPT123」Q寶方案



「NIPT123」愛妻/暖爸方案



如有任何問題歡迎隨時與我們聯繫，若造成貴單位的不便，敬祈見諒，感謝您的支持與配合。

敬祝 醫安！

訊聯生物科技股份有限公司 敬上 105.06